


USB Free Link

DIREKTE KOMMUNIKATION WAAGE – PC
OHNE ZUSÄTZLICHE PROGRAMME

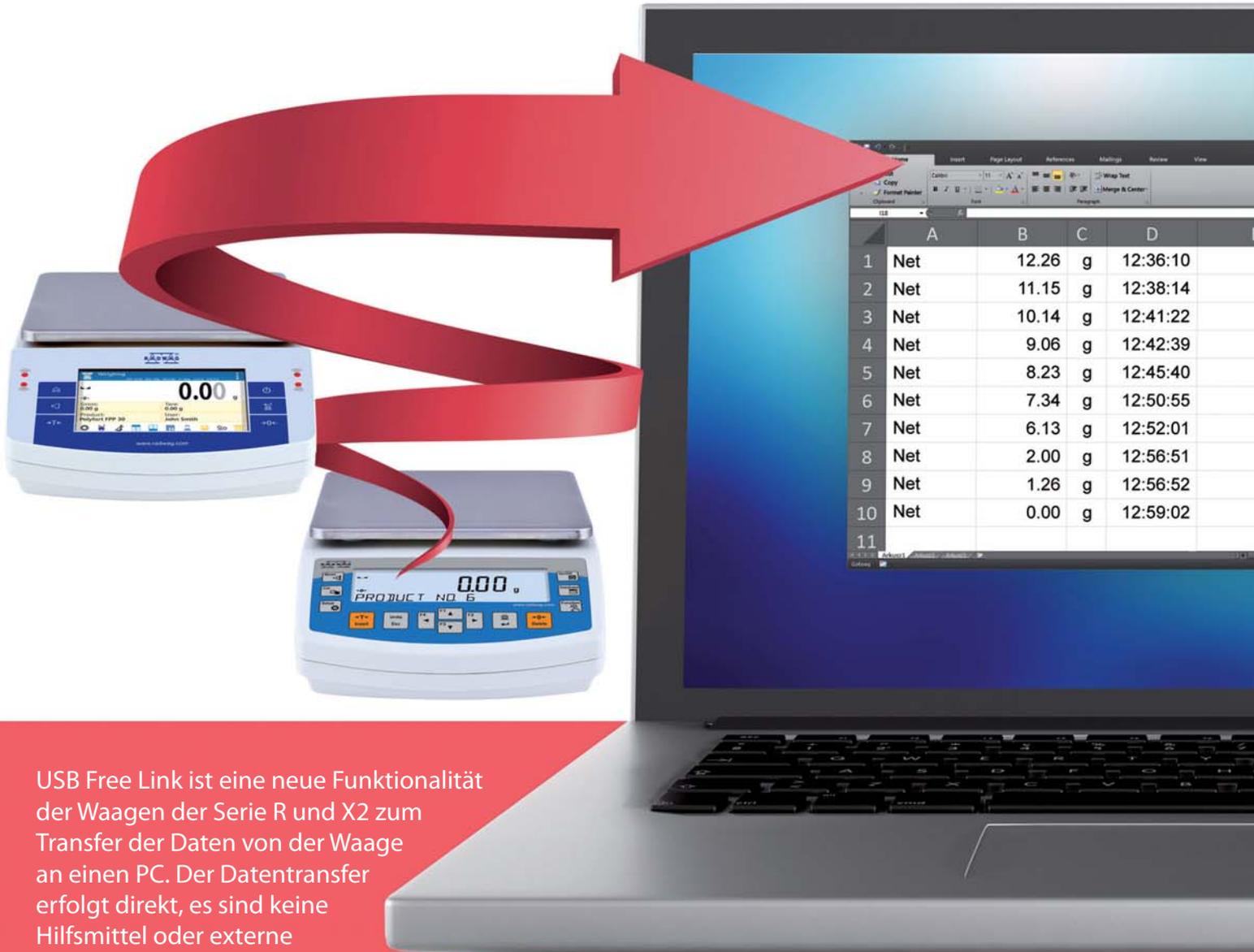

USB Free Link ist eine neue Funktionalität der Waagen der Serie R und X2 zum Transfer der Daten von der Waage an einen PC. Der Datentransfer erfolgt direkt, es sind keine Hilfsmittel oder externe Programme notwendig - die Waage muss einfach an den PC mit einem USB-Kabel angeschlossen werden.

Mit USB Free Link werden nach Drücken der entsprechenden Taste (z.B. Enter - Drucken, F1 - Kopfzeile, F3 - Fußzeile) die Daten automatisch an ein beliebiges, aktives PC-Programm (z.B. Word, Excel, Notepad etc.) mit ihrem aktuellen Format übertragen.



RADWAG ELEKTRONISCHE WAAGEN
ZUKUNTSORIENTIERTE WÄGETECHNOLOGIE

Transfer der Daten an aktive Programme

Automatische Übertragung von Daten an Notepad, Word und andere Textbearbeitungsprogramme.

Net	12.26 g	12:36:10
Net	11.15 g	12:38:14
Net	10.14 g	12:41:22
Net	9.06 g	12:42:39
Net	8.23 g	12:45:40
Net	7.34 g	12:50:55
Net	6.13 g	12:52:01
Net	2.00 g	12:56:51
Net	1.26 g	12:56:52
Net	0.00 g	12:59:02

Übertragung von Daten an Tabellenkalkulationsprogramme

Automatische Übertragung von Daten an Excel, OpenOffice Calc oder andere Tabellenkalkulationsprogramme.

	A	B	C	D
1	Net	12.26 g	12:36:10	
2	Net	11.15 g	12:38:14	
3	Net	10.14 g	12:41:22	
4	Net	9.06 g	12:42:39	
5	Net	8.23 g	12:45:40	
6	Net	7.34 g	12:50:55	
7	Net	6.13 g	12:52:01	
8	Net	2.00 g	12:56:51	
9	Net	1.26 g	12:56:52	
10	Net	0.00 g	12:59:02	

Speichern der Daten in CSV und TXT Dateien

Datenimport in beliebige Tabellenkalkulationsprogramme